


my:MPG/my:MPG Klinik-Verwaltung einfach im Griff

Installationsanleitung

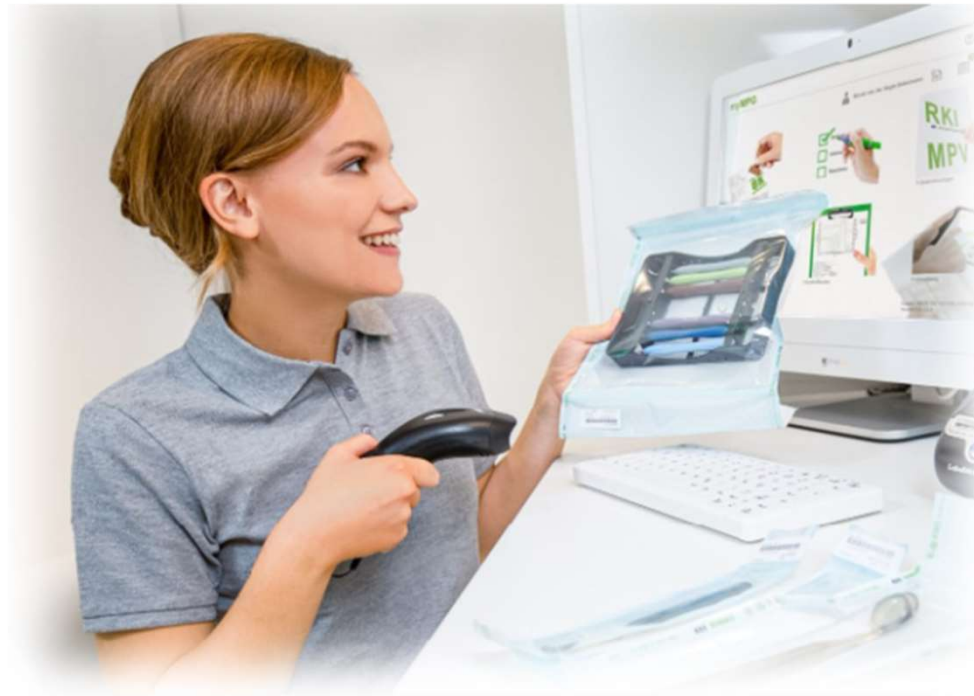

Version 1.0/ 2024

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik

Inhaltsverzeichnis

- SystemvoraussetzungenSeite 1
- Installation (Einzelplatz und Netzwerk)Seiten 2 - 12
- Registrierung und FreischaltungSeiten 13 - 16
- Unterstützte Barcode-ScannerSeite 17
- Scanner-Anbindung.Seiten 18 - 20
- Zugriffsrechte und Virens Scanner (für Administratoren)Seite 21
- Datensicherung (für Administratoren)Seite 22
- Support / Hotline / FAQ'sSeite 23 - 24

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik - Systemvoraussetzungen

Eine Software benötigt bestimmte PC-Voraussetzungen, die wir Ihnen hier aufzeigen möchten.
Sollte Ihr PC diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wenden Sie sich bitte an die Hotline.

☎ 0341 – 7 02 14 21


@ hotline@plandent.de

Systemvoraussetzungen:

- mindestens Intel Core i3 empfohlen i5
- mindestens 8GB, empfohlen 16GB
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10 Pro oder neuer (32- oder 64-Bit), Windows Server 2019 oder neuer
- Festplattenbedarf für Software und Daten ca. 10 GB
- Bildschirmauflösung mind. 1280×800 Pixel, Touchscreen empfohlen
- USB-Anschlüsse mind. USB 2.0
- RJ45 Netzwerkanschluss 10/100/1000 Mbps
- Datensicherungsmöglichkeit

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Einzelplatz)

- Bitte wählen Sie die für Sie zutreffende Einstellung aus.
 - Die Netzwerk-Installation wird später separat beschrieben.
 - Klicken Sie danach auf „Installieren“.
-
- Bitte wählen Sie die für Sie zutreffende Einstellung aus.
 - Klicken Sie danach auf „weiter“.


my:MPG >> Installation 

Zurück alle Systemvoraussetzungen empfohlen:

Betriebssystem:	Windows 7 (bei Server-Installation: Windows-Server 2008)
Hauptspeicher:	4 GB
freier Festplattenspeicher:	2 GB
Netzübertragung:	1,0 GBit/s
Auflösung Monitor:	min. 1280x800

Netzwerkinstallation

☒ Einzelplatzinstallation ☐ Arbeitsplatzinstallation ☐ Serverinstallation

my:MPG >> Installation 

Bei einer Einzelplatzinstallation ist es notwendig, dass keine anderen Softwareprodukte wie z.B. my:Wawi, my:MPG, praxisprofiler oder praxisprofiler MPG in der Praxis eingesetzt werden.

☐ Es wird mindestens eins der genannten Produkte genutzt.

☐ Es werden keine der genannten Produkte genutzt.

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Einzelplatz)

- Bestätigen Sie das Lizenzabkommen mit „Annehmen“.
- Klicken Sie jetzt bitte auf „Installieren“.

my:MPG >> Installation



Lizenzabkommen

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Die nachfolgenden Lizenzbestimmungen gelten für:
1. Die Installation und Verwendung von my:MPG.
2. Für die Installation und Verwendung der mitgelieferten Datenbank.
Die Lizenzbestimmungen sind Bestandteil der Installation. Der Anwender muss ihnen zustimmen, um die Installation fortsetzen zu können.
Lizenzvereinbarung für my:MPG
§1 Urheberrechte:
my:MPG ist ein Produkt der NWD Gruppe, Münster. Alle Softwarebestandteile von my:MPG, die mitgelieferten Datenbestände und (Produkt-) Bilder sowie die Programm- und Datenkonzeption sind urheberrechtlich geschützt.
§2 Vertriebsrechte:
Zum Vertrieb von my:MPG sind nur autorisierte Vertriebspartner berechtigt. Die allgemeinen Vertriebsrechte für my:MPG liegen bei der NWD Gruppe, Münster.
§3 Nutzungsrechte:
Der Anwender erhält das nicht übertragbare und ausschließlich persönliche Nutzungsrecht für dieses Programm. Der Anwender erhält das Recht, dieses Programm als Einzelplatzlizenz oder als

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, klicken Sie auf Annehmen. Sie müssen die Lizenzvereinbarungen anerkennen um my:MPG installieren zu können.

Abbruch

Annehmen

my:MPG >> Installation



Installation des Firebird-Datenbankservers

Installationsverzeichnis: C:\Program Files (x86)\Firebird\NWD-S wählen

Installation der Datenbankdateien von my:MPG

Installationsverzeichnis: C:\Program Files (x86)\myMPG\Data wählen

Abbruch

Installieren

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Einzelplatz)

- Warten Sie bitte, bis der Installationsschritt abgeschlossen ist.
- Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch
- Die Installation von my:MPG/my:MPG Klinik war erfolgreich.
- Soll die Software my:MPG/my:MPG Klinik sofort gestartet werden, wählen Sie bitte diesen Punkt aus.
- Anschließend klicken Sie bitte auf „Schließen“.

my:MPG >> Installation



Installation Client

Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

my:MPG >> Installation



Die Installation wurde erfolgreich durchgeführt.

☐ my:MPG nach der Installation ausführen

Schließen

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Netzwerk)


- Die Netzwerkinstallation sollte nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Für technische Fragen setzen Sie sich bitte mit der Hotline (Tel. 0341/ 7 02 14 21) in Verbindung.
- Halten Sie bitte auch Rücksprache, wenn bereits ein Firebird-Server auf dem Server installiert ist.
- Starten Sie bitte den Installationsmanager mit einem Doppelklick auf die Datei „**start- myMPG.exe**“
- Wählen Sie die **Serverinstallation** aus.
- Bitte klicken Sie anschließend auf „**Installieren**“.



Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Netzwerk)

- Bestätigen Sie das Lizenzabkommen mit „**Annehmen**“
- Das Installationsverzeichnis des Firebird Servers sollte unverändert bleiben.
- Das Standardverzeichnis der Datenbank kann unverändert bleiben oder Sie passen den Pfad individuell an, z. B. Ihr Serververzeichnis.
- Klicken Sie jetzt bitte auf „**Installieren**“.

my:MPG >> Installation 

Lizenzabkommen

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Die nachfolgenden Lizenzbestimmungen gelten für:

1. Die Installation und Verwendung von my:MPG.
2. Für die Installation und Verwendung der mitgelieferten Datenbank.

Die Lizenzbestimmungen sind Bestandteil der Installation. Der Anwender muss ihnen zustimmen, um die Installation fortsetzen zu können.


Lizenzvereinbarung für my:MPG

§1 Urheberrechte:
my:MPG ist ein Produkt der NWD Gruppe, Münster. Alle Softwarebestandteile von my:MPG, die mitgelieferten Datenbestände und (Produkt-) Bilder sowie die Programm- und Datenkonzeption sind urheberrechtlich geschützt.

§2 Vertriebsrechte:
Zum Vertrieb von my:MPG sind nur autorisierte Vertriebspartner berechtigt. Die allgemeinen Vertriebsrechte für my:MPG liegen bei der NWD Gruppe, Münster.

§3 Nutzungsrechte:
Der Anwender erhält das nicht übertragbare und ausschließlich persönliche Nutzungsrecht für dieses Programm. Der Anwender erhält das Recht, dieses Programm als Einzelplatzlizenz oder als

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, klicken Sie auf Annehmen. Sie müssen die Lizenzvereinbarungen anerkennen um my:MPG installieren zu können.

my:MPG >> Installation 

Installation des Firebird-Datenbankservers

Installationsverzeichnis:

Installation der Datenbankdateien von my:MPG

Installationsverzeichnis:


Um die Netzwerkinstallation zu beschleunigen können Sie hier bereits die IP-Adresse des Servers eintragen, sofern Sie Ihnen bekannt ist. Diese IP-Adresse wird dadurch direkt bei der Arbeitsplatzinstallation eingetragen.

IP-Adresse Server:

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Netzwerk)

- Nach der erfolgreichen Installation ist ein Neustart des PCs notwendig.
- Bestätigen Sie bitte das Dialogfeld mit „Ja“.

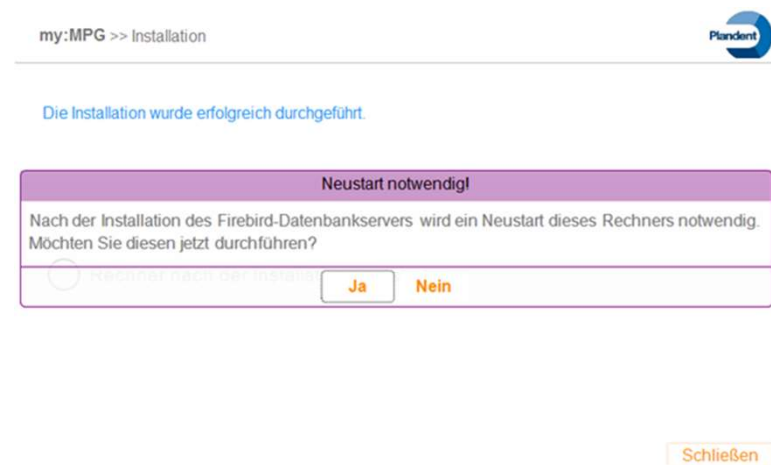

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Client)

- Starten Sie bitte den Installationsmanager mit einem Doppelklick auf die Datei „**start- myMPG.exe**“
- Wählen Sie die **Arbeitsplatzinstallation** aus.
- Bitte klicken Sie anschließend auf „**Installieren**“.



my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Client)

- Bestätigen Sie bitte das Lizenzabkommen mit „Annehmen“.
- Das Installationsverzeichnis des Firebird-Servers sollte unverändert bleiben.
- Das Standardverzeichnis der Datenbank kann unverändert bleiben oder Sie passen den Pfad individuell an, z. B. Ihr Serververzeichnis.
- Klicken Sie jetzt bitte auf „Installieren“.

my:MPG >> Installation 

Lizenzabkommen

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Die nachfolgenden Lizenzbestimmungen gelten für:

1. Die Installation und Verwendung von my:MPG.
2. Für die Installation und Verwendung der mitgelieferten Datenbank.

Die Lizenzbestimmungen sind Bestandteil der Installation. Der Anwender muss ihnen zustimmen, um die Installation fortsetzen zu können.

Lizenzvereinbarung für my:MPG

§1 Urheberrechte:
my:MPG ist ein Produkt der NWD Gruppe, Münster. Alle Softwarebestandteile von my:MPG, die mitgelieferten Datenbestände und (Produkt-) Bilder sowie die Programm- und Datenkonzeption sind urheberrechtlich geschützt.

§2 Vertriebsrechte:
Zum Vertrieb von my:MPG sind nur autorisierte Vertriebspartner berechtigt. Die allgemeinen Vertriebsrechte für my:MPG liegen bei der NWD Gruppe, Münster.

§3 Nutzungsrechte:
Der Anwender erhält das nicht übertragbare und ausschließlich persönliche Nutzungsrecht für dieses Programm. Der Anwender erhält das Recht, dieses Programm als Einzelplatzlizenz oder als

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, klicken Sie auf Annehmen. Sie müssen die Lizenzvereinbarungen anerkennen um my:MPG installieren zu können.

my:MPG >> Installation 

Installation der Programmdateien von my:MPG

Installationsverzeichnis:

Für eine korrekte Netzwerkinstallation müssen Sie die IP-Adresse des Server angeben.

IP-Adresse Server:

my:MPG/my:MPG Klinik – Installation (Client)

- Warten Sie bitte, bis der Installationsschritt abgeschlossen ist.
- Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch
- Die Installation von my:MPG/my:MPG Klinik war erfolgreich.
- Soll die Software my:MPG/my:MPG Klinik sofort gestartet werden, wählen Sie bitte diesen Punkt aus.
- Anschließend klicken Sie bitte auf „Schließen“.

my:MPG >> Installation



Installation Client

Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

my:MPG >> Installation



Die Installation wurde erfolgreich durchgeführt.


☒ my:MPG nach der Installation ausführen

Schließen

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Freischaltung

- Starten Sie die Software my:MPG/my:MPG Klinik.
- Es öffnet sich der Assistent zur Konfiguration.
- Erfassen Sie als Erstes die wesentlichen Eckdaten zu Ihrer Praxis

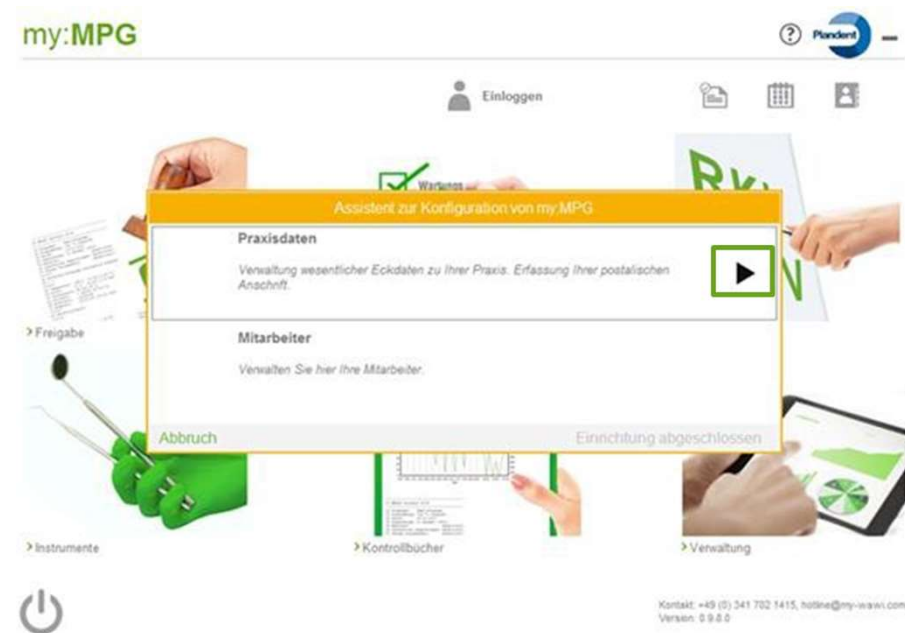

my:MPG/my:MPG Klinik – Freischaltung

- Legen Sie bitte einen neuen Unternehmensstandort an und füllen alle Pflichtfelder aus.
- Anschliessend können Sie das Fenster schließen

my:MPG / Standortverwaltung / Praxis Die Zahnärzte am Silbersee Dr. Muster, Dr. Test & Dr. Mustermann, XX

< schließen

Verwaltung der Standorte

Praxis Die Zahnärzte am Silbersee Dr. Muster, Dr. Test & Dr. Mustermann, Mönchengladbach

Anschrift

Anrede: Praxis

Titel: Die Zahnärzte am Silbersee

Name 1: Dr. Muster, Dr. Test &

Name 2: Dr. Mustermann

Zusatz: Zusatz zur Praxis-Kabine

Strasse / Nr.: Musterstrasse 1

Land: Deutschland

E-Mail Server

Posteingangsprotokoll: SMTP/SSL

☐ Sichere Verbindung (SSL)

☐ Authentifizierung erforderlich


Port: 9

Benutzername:

Passwort:

my:MPG/my:MPG Klinik – Freischaltung

- Bitte legen Sie noch einen Mitarbeiter Ihrer Praxis an

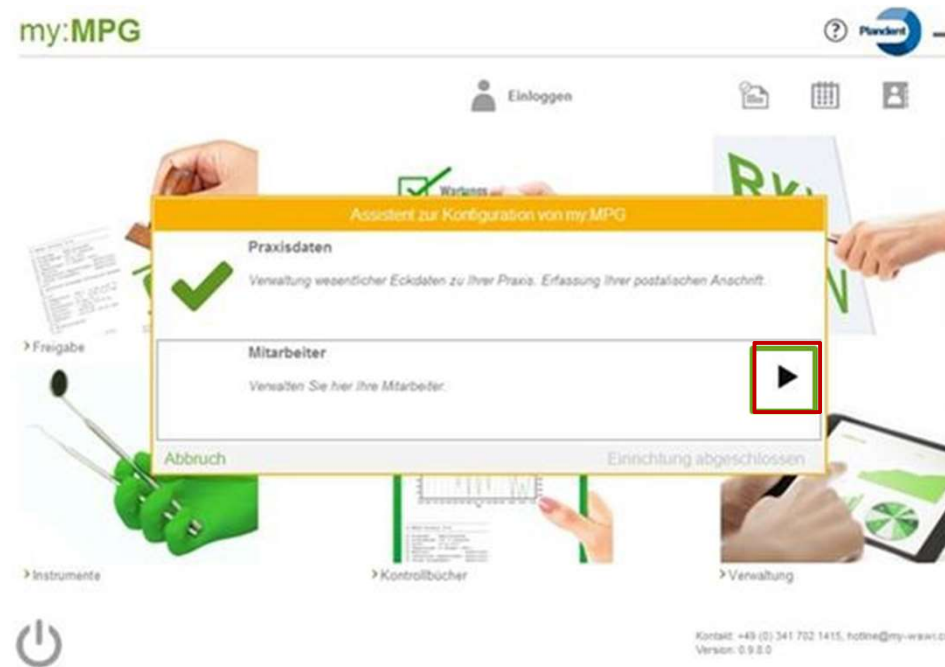

my:MPG/my:MPG Klinik – Freischaltung

- Über das + Symbol können Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen.
- Vergeben Sie einen Anmeldedaten, bestehend aus Kurznamen und Passwort, mit welchen sich der jeweilige Mitarbeiter in my:MPG/my:MPG Klinik einloggen kann.

The screenshot shows the user creation interface for my:MPG/my:MPG Klinik. The interface is divided into four main sections: Personalauswahl, Personaldaten, Betriebsdaten, and Zugriffsrechte. The 'Personaldaten' section contains fields for personal information, with 'Kurzname' and 'Passwort' highlighted by a red box. The 'Betriebsdaten' section contains a list of checkboxes for various regulations. The 'Zugriffsrechte' section contains a list of checkboxes for access rights. A red box highlights the '+' icon in the top right corner of the interface.

Personalauswahl

A, A
Muster, Max
Peters, Mia
Schuster, Maria

Personaldaten

PersNr.

aktiv ☒

Titel

Vorname

Name

Straße /Hnr.

Land

PLZ / Ort

Kurzname

Passwort

Bemerkung

Betriebsdaten

Unterweisungen

- ☐ Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften DGUV-Vorschrift 1
- ☐ Arbeitsmedizinische Vorsorge ArbMedVV G24, G37, G42
- ☐ Arbeitsmittel Druckgeräte §9 Abs.BetrSichV
- ☐ Brandschutz/Erste Hilfe/Elektrosicherheit DGUV-Vorschrift 1
- ☐ Datenschutz §5 BDSG
- ☐ Einweisung des Technikers
- ☐ Hygiene TRBA/BGR 250
- ☐ Jugendarbeitsschutzgesetz §26 Abs. 1 und 2 JArsSchG
- ☐ Laserstrahlung DGUV-Vorschrift 11
- ☐ Medizinproduktegesetz MP und Medizinproduktebetrieiberverordnung, Hochfrequenzgerät MPBetreibV
- ☐ Mutterschutz MuSchG
- ☐ Ro Auffrischung
- ☐ RoVerordnung nach §63
- ☐ Sammelunterweisung elektromedizinische Geräte
- ☐ Schweigepflicht §203StGB
- ☐ Umgang mit Gefahrstoff §4 GefStoffV
- ☐ Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen §1 BioStoffV und TRBA 250, 7.2.

Zugriffsrechte

☐ Administrator


- ☒ Praxis-Stammdaten
- ☐ Mitarbeiterdaten
- ☐ Materialverwaltung
- ☒ Freigabe von Chargen
- ☐ Kontrollbücher
- ☐ Statistiken ohne Beträge
- ☐ Statistiken mit Beträgen

Details...

Plandent


my:MPG/my:MPG Klinik – Freischaltung

- Die Konfiguration von my:MPG/my:MPG Klinik ist mit dem Schritt beendet
- Bestätigten Sie das Fenster mit „Einrichtung abgeschlossen“

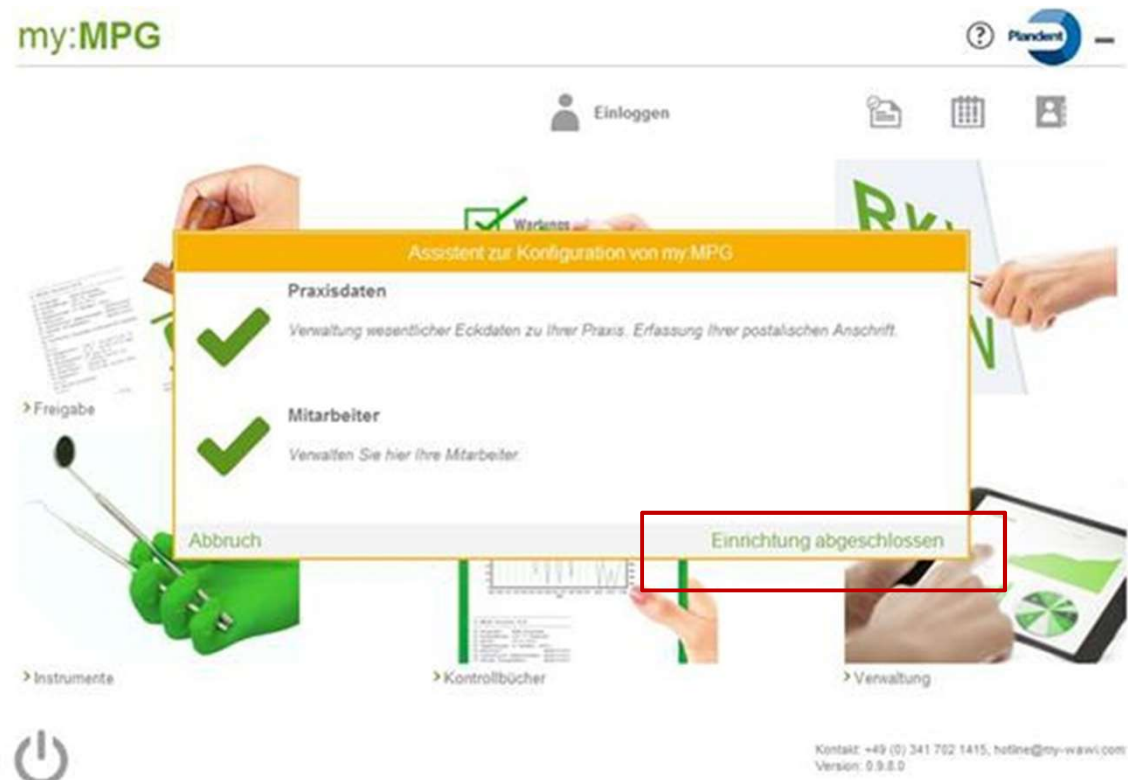

my:MPG/my:MPG Klinik – Freischaltung

- Geben sie bitte die Lizenznummer von my:MPG/my:MPG Klinik ein und bestätigen das Fenster mit „Übernehmen“
- Nach erfolgreicher Freischaltung können Sie sich mit Ihrem Mitarbeiter einloggen.

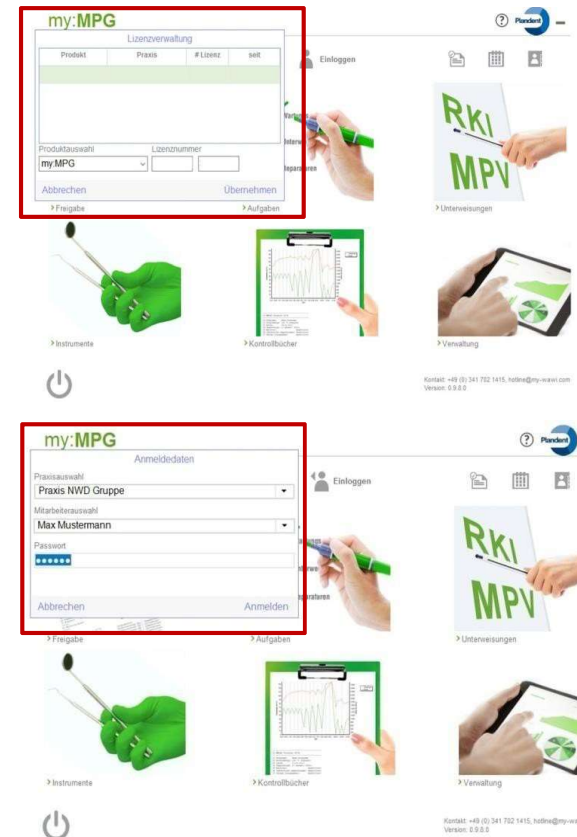

Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Scanner

Folgende Barcode-Scanner können in my:MPG/my:MPG Klinik eingebunden werden und unterstützen Sie beim Ein- und Ausbuchen von Verbrauchsmaterialien:

Kabellose Scanner

- OPN-2001
(1D-Scanner mit Speicherfunktion, zum Erfassen der Verbräuche)
- Albasca MK-5120 ZB
(2D-Funk-Scanner, Scannen ausgewählter Lieferscheine)

Kabelgebundene Scanner

- Albasca MK-5600
(2D-Scanner, Scannen ausgewählter Lieferscheine)
- Albasca MK-5120
(2D-Scanner, Scannen ausgewählter Lieferscheine)



Plandent

my:MPG/my:MPG Klinik – Scanner


- Damit my:MPG/my:MPG Klinik weiß, welche Scanner zum Einsatz kommen, müssen in der Software entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.
- Öffnen Sie den Bereich „Verwaltung“ und wählen Sie links im Menü unter den Eintrag „Option“ den Reiter „Scanner Einstellung“ aus
- Klicken Sie oben rechts auf „Bearbeiten“ und Sie können die Daten zu Ihren Scannern erfassen.



Anschlussart	Typ	Datenübergabe	COM-Port
stationär	ALBASCA MK-5500	keine Artbildung	

my:MPG/my:MPG Klinik – Scanner

- Sie finden die Daten zum Scanner-Anschluss im „Geräte-Manager“ Ihres PC's.
- Um diesen zu öffnen, klicken Sie bitte mit rechts auf das „Windows-Symbol“ in der Task-Leiste und wählen anschließend im Menü den Eintrag „Geräte-Manager“.

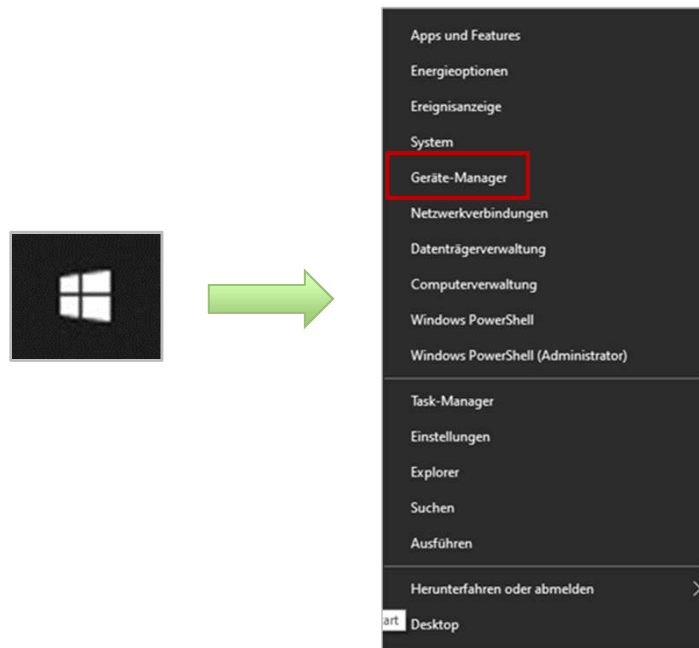

my:MPG/my:MPG Klinik – Scanner

- Im Auswahlfenster klicken Sie den Bereich „Anschlüsse (COM & LPT)“ an.
- Es werden Ihnen jetzt alle Geräte angezeigt, welche mit einen USB-Kabel an den PC angeschlossen sind.
- Ihr angeschlossener Scanner befindet sich ebenfalls in der Ansicht.
- In Klammern (COM...) wird Ihnen die Nummer des COM-Anschlusses angezeigt.
- Diese Nummer müssen Sie in my:MPG/my:MPG Klinik beim COM-Port hinterlegen.

my:MPG/my:MPG Klinik – Zugriffsrechte und Virens Scanner (für Admins)

- Es empfiehlt sich noch einige Einstellungen vorzunehmen, um Zugriffs- und Performanceprobleme zu vermeiden.
- Auf diese Verzeichnisse sollte bei den Ordnerberechtigungen ein „Vollzugriff“ gesetzt werden:
 - Programmverzeichnis C:\Programme\myMPG\ (32bit)
 C:\Programme (x86)\myMPG (64bit)
 - Firebirdserver C:\Programme (x86)\Firebird
 - Datenbankverzeichnis C:\Programme (x86)\myMPG\Data
- Bei der Installation eines Virens Scanners ist darauf zu achten, dass die obengenannten Verzeichnisse vom Echtzeit-Viren-Scan ausgeschlossen werden.

my:MPG/my:MPG Klinik – Datensicherung (für Admins)

- Für eine vollständige Datensicherung sollte das my:MPG-Datenbankverzeichnis täglich auf einen externen Datenträger gesichert werden.
 - Einplatzinstallation z. B. C:\Programme(x86)myMPG\Data
 - Netzwerkinstallation z. B. P:\Daten\myMPG
- Bei einer Datensicherung über eine externe Backupsoftware beenden Sie bitte vorher die folgenden Firebird-Dienste:

 Firebird Guardian - nwd-s-firebird	Firebird Server...	Gestartet	Automa...	Lokales System
 Firebird Server - nwd-s-firebird	Firebird Datab...	Gestartet	Manuell	Lokales System

my:MPG/my:MPG Klinik - Support / Hotline / FAQ's

- Häufig gestellte Bedienfragen finden Sie übersichtlich zusammengefasst in jedem Software-Bereich.
- Um die FAQ's zu öffnen, klicken Sie bitte jeweils oben rechts auf das „Fragezeichen“.



my:MPG/my:MPG Klinik - Support / Hotline / FAQ's

- Sie haben weitere Fragen oder Interesse an einer Software-Schulung?
- Die Plandent-Hotline hilft Ihnen gern weiter.

Kontaktdaten der Plandent-Hotline:

☎ 0341 - 7 02 14 21

@ hotline@plandent.de

